




Enzymex L9

Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji
wyrobów medycznych (narzędzi, endoskopów itp.)
przed kolejnym etapem reprocessowania

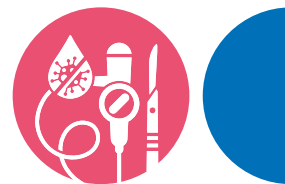


Skuteczność potwierdzona badaniami w warunkach brudnych:

0,5% – 5 minut: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec wirusów
otoczkowych **1% – 30 minut:** bójczy wobec prątków gruźlicy

Produkt do użytku profesjonalnego.


Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.

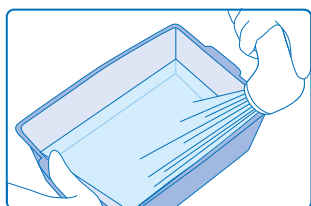


1 Napełnij wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową wodą.




2 Na każdy litr wody wlej odpowiednią ilość koncentratu
(w zależności od wymaganego stężenia):
5 ml lub 10 ml koncentratu na litr wody. Zamieszaj roztwór.

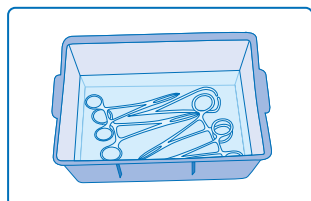


3 Dokładnie zanurz narzędzia.
Wypełnij płynem wszystkie kanały endoskopu.

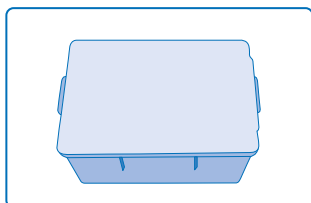

4 Wanienkę dezynfekcyjną przykryj.
Odczekaj zalecany czas kontaktu: 5 lub 30 minut.
Doczyść, jeśli to konieczne.

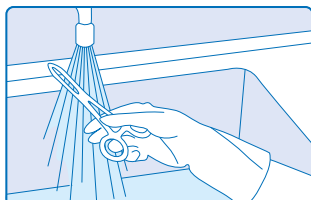

5 Wyjmij i wypłucz dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.

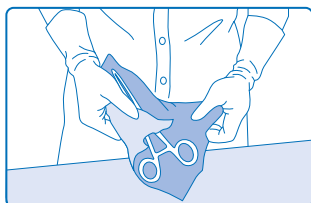

6 Osusz i poddaj dalszym odpowiednim procesom higienicznym
zgodnym z przyjętą procedurą.